

Injectietechniek

Injecteer vertrouwen in uw workflow.



Ik plaats regelmatig directe veneers, maar...

"Ik wil niet dat opbouwen in lagen veel tijd kost - ik heb precisie én snelheid nodig."

"Ik zoek voorspelbare resultaten zonder eindeloos polijsten."

"Ik wil een techniek die aansluit op mijn bestaande workflow."

Venus® flowables zijn nu officieel goedgekeurd voor de injectietechniek.

De injectietechniek biedt voorspelbare resultaten met minimale inspanning voor het modelleren. Venus Diamond Flow en Venus Bulk Flow ONE beschikken over de ideale viscositeit en een naadloze kleurintegratie. U houdt de controle, wij leveren de juiste hulpmiddelen.

Waarom dit belangrijk is:

- **Efficiënte applicatie**
Bespaar behandeltime en creëer ruimte in uw agenda, zonder concessies te doen aan kwaliteit.
- **Natuurlijke esthetiek**
U hoeft slechts te kiezen uit een minimaal aantal kleuren. De Venus Diamond Flow Pure Shades combineren een natuurlijke uitstraling met het gemak van een monochromatische aanpak.
- **Naadloze integratie**
Geschikt voor zowel digitale als analoge mock-ups, in combinatie met ons transparante afdruckmateriaal Memosil® 2 en uw favoriete flowables - voor consistente resultaten en een hoge patiënttevredenheid.

Choose it. Use it. Love it.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Injectietechniek door Dr. Edoardo Fossati, Italië



Situatieafdruk van de uitgangssituatie.

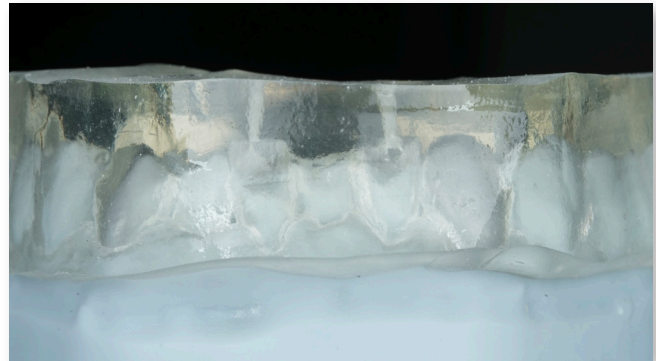

Wax-up en maken van transparante mallen met injectiekanalen.



Isolatie, adhesieve voorbereiding, composietinjectie met behulp van de transparante mal(len), polymerisatie, afwerking en polijsten.



“Een flowable composiet dat consequent presteert bij verschillende indicaties helpt mij mijn workflow te stroomlijnen en tegelijkertijd klinische precisie te behouden. De injectietechniek waardeer ik vooral vanwege het vermogen om anatomische details nauwkeurig te reproduceren en voorspelbare, esthetische resultaten te realiseren.”

Dr. Sandra Kaiser, Duitsland

Workflowtip

Maak een transparante siliconensleutel van de wax-up met Memosil® 2 voor een nauwkeurige positionering van het composiet.

Gebruik iBOND® Universal voor betrouwbare hechting en werk af met Venus Supra polishers voor een hoogglanzend, natuurlijk resultaat.

Precisie voor u. Perfectie voor hen.



Ontdek meer:



kulzer.nl/venus