



## Translux® Wave

Betrouwbaar en effectief polymeriseren.

Lichtgewicht, draadloos, ergonomisch en technisch state of the art.

De Translux Wave is een LED-polymerisatielamp voor lichtuithardende tandheelkundige materialen zoals adhesieven en composieten. De lamp is ontwikkeld om een constante, hoogkwalitatieve prestatie te leveren voor een betrouwbare uitharding.


Giving a hand to oral health.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# Translux® Wave

- **Penvorm:** De lichtgewicht en ergonomische penvorm is comfortabel in gebruik. De 360° draaibare lichtgeleider met een hoek van 70° zorgt voor een beter bereik van de zijdelingse delen.
- **Één-knops bediening:** Kies met slechts 1 knop tussen het programma van 10 seconden of 20 seconden met soft start. Het gekozen programma wordt door middel van LED's aangegeven.
- **Draadloos:** Een draadloze lamp betekent voor u een optimale bewegingsvrijheid.
- **Betrouwbare uitharding:** De Translux Wave heeft een sterke lithium-ion accu met lange levensduur. Opladen kost weinig tijd en de accu is gemakkelijk zelf te vervangen. De ingebouwde lichtintensiteitsmeter geeft u de zekerheid van een goede prestatie.

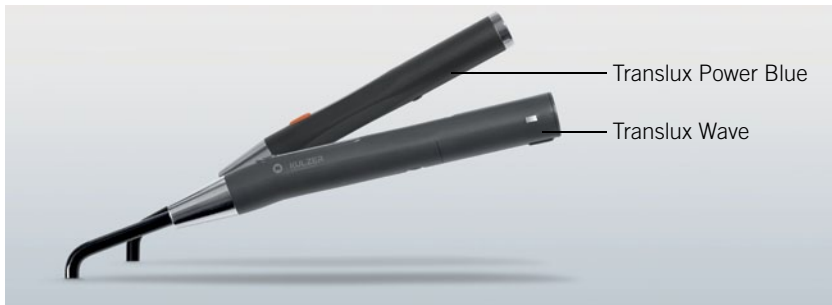

## Comfort:

Omdat de lichtgeleider van de Translux Wave een grotere hoek van 70° heeft, bereikt u gemakkelijk de zijdelingse delen; zelfs bij patiënten met een beperking in het openen van de mond.



## Efficiënt:

De accu van het handstuk en de contactpunten in de oplader kunt u eenvoudig zelf vervangen.

Bestelinformatie		
Bestelnr.	Artikel	Inhoud
66055012	Translux Wave	Handstuk, lithium-ion accu, 8 mm lichtgeleider, beschermkapje, oplader, adapter
Accessoire		
66057365	Lichtgeleider 8 mm, 70°	
66057363	Opladbare accu	
66016455	Beschermkapje	
66057382	Contactpunten voor oplader	
66057383	Handstuk incl. accu	
66057384	Oplader grijs	
66057468	Adapter	

Technische gegevens Translux Wave	
Lichtintensiteit	1000 mW/cm <sup>2</sup>
Golflengte	440 – 480 nm
Afmetingen oplader	L140 x W60 x H60 mm
Afmetingen handstuk	L210 mm, max. ø 23 mm
Gewicht	Oplader ca. 437 g, handstuk 145 g
Voeding (oplader)	100 to 240 V(AC), 50/60 Hz, 5 W, 12 – 18 VA
Voeding (handstuk)	Opladbare lithium-ion accu 3.6 V/2000 mAh
Lichtbron	Zeer sterke mono-chromatische LED
Lichtgeleider	ø 8 mm, 70°



## Contact in de Benelux

Kulzer Benelux B.V.  
Postbus 986  
NL-2003 RZ Haarlem  
T +31 (0)23 543 42 50  
F +31 (0)23 543 42 55  
info-benelux@kulzer-dental.com